

Multiline Next AC+

- Stol til ambulant behandling



Multiline Next AC+ - Stol til ambulant behandling

MULTILINE NEXT AC+.

Product safety

MULTILINE NEXT AC+ is independently tested and certified



Ergonomics

Fixed and retractable armrests for simple repositioning before and after surgery

Conductivity

The EL 11 carbon fibre cover is electrically conductive

Minimal space requirement

Normal chair position with 90° angle of leg section, perfect for boarding at a height of 58 cm; minimal space requirement

Mobility

12.5 cm castors for comfortable and effortless mobility, one adjustable wheel for precise movement in a straight line

Choice of headrests

Ergo with Vario double joint, Quick assist coupling, interchangeable upholstery as well as full and half spherical caps for Quick assist



Flexibility

Infusion rod holder with right/left swivelling position - one-handed operation

Hygiene

Compliance with stringent regulations, ease of access, clean surface finish, tested surfaces, sparing use of seams

Seated and reclining comfort

Comfortable, 60 cm wide upholstery for pre- and post-operative waiting and recovery times

Stability

High load capacity up to 220 kg - safe handling during patient transport, also for lateral repositioning

Direction

One pedal for central braking system, movement in a straight line, steering release for laterally parallel relocating

Behandlingsstol med mange funktioner i én: Stolen kan fungere som modtage-, transport, undersøgelses-/behandlings- og hvilestol.

Ergonomi, funktionalitet, mobilitet og patientkomfort udgør en unik kombination af stol og leje.

Fleksibilitet, præcision, håndtering, mobilitet og sikkerhed - stolen giver effektiv anvendelse af pladsen og har en høj grad af omkostningseffektivitet.

Den er perfekt til kirurgisk forberedelse, transport af patienter til og fra operationsstuen, efter kirurgi og transport i opvågningsstuen efter anæstesi.

MULTILINE NEXT AC+ er ideel i små rum, hvor konventionelle senge ikke passer - et godt alternativ til behandlingslejer og evt. senge i f.eks. akutmodtagelse eller dagambulatorier.

Patienten kan modtages og placeres i stolen, og herefter transporteres siddende til undersøgelse og behandling - ved behandling kan stolen indstilles som leje, og hæves til en behandlingshøjde på helt op til 90 cm over gulvet.

Armlænene kan fungere som sengehest, når stolen er indstillet som leje.

Et dynamisk fleksibelt affjedringssystem i sædedelen, understøtter bevægelsesfriheden for rygsøjlen, bækkenet og hofterne, og lindrer således presset herpå, til stor fordel for patienten.

Stolen har Trendelenburgposition, hvis patienten skulle blive dårlig undervejs - funktionen kan hurtigt aktiveres med foden, således hænderne er fri til at assistere.

Efter behandling kan stolen bruges som hvileleje/stol, indtil patienten er klar til at tage hjem igen.

Let adgang og enkel desinfektion sikrer maksimal hygiejne.

Elektrisk justering af ryglæn, sæde og benstøtter, samt højde.

Inkl. 4 motorer, centralbremse og stærkt batteri.

Multiline Next AC+ - Stol til ambulans behandling

Fås i flere farver og 2 kvaliteter, "Compact" og "Premium"

compact.



premium.



Tekniske data:

	Multiline Next AC+
Længde - siddefunktion (gulvplads)	107 cm
Længde - liggefunktion	200 cm
Bredde - total	77 cm
Længde - liggeflade	200 cm
Bredde - liggeflade	60 cm
Skumtykkelse	9 cm
Længde - armlæn	73 cm
Bredde - armlæn	7 cm
Indgangshøjde	58 cm
Højdejustering	32 cm (58-90 cm)
Hjuldiameter	125 mm
Hældning - ryglæn	-5° til 78°
Hældning - sædedel	0 til 22°
Hældning - fodstøtte	0 til 90°
Spænding	100-240v/ 50-60Hz
Egenvægt	128 kg
Maks. brugervægt	220 kg



TüV-testet

Kontakt os gerne for yderligere information



Multiline Next AC+ - Stol til ambulant behandling

Et stort tilbehørsprogram med bla., nakkepølle, hovedstøtte, svingbart dropstativ, gynækologisk tilbehør, patientbord, operationsbord og meget mere, gør at stolen kan skræddersyes til Jeres behov.

Her ses et lille udpluk af tilbehørsmuligheder:



Standard beslag




Ladestation



Drop-/infusionsstativ



Infusionsholder

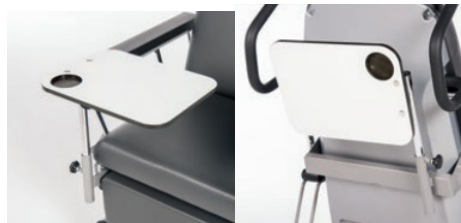

Patientbord og holder



Fodpedal til indstilling



Göepelholder

Intelligente og hurtigt udskiftelige nakkestøtter. Ergo nakkestøtte med Vario dobbeltled til enhåndsoperation, Quick assist lynkobling til udskiftelige nakkestøtter samt individuelle stretch-, hel- og halvkuglepuder, hver med Quick assist-udstyr.

Valgfrit: udskiftelige polstringer. Strækbare, hel- og halvkugleformede støtter.

